

# 米萌2代尿尿贴


## 产品说明书

米萌，智能生活的小而美



北京米萌智能科技有限公司  
网址: <http://www.mimeng.cc>  
邮箱: [service@mimeng.cc](mailto:service@mimeng.cc)  
QQ: 3131978870  
电话: 010-59480890

## 产品示意图

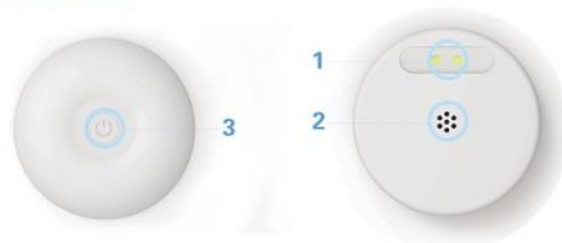

1. 充电口

2. 信号采集口

3. 状态指示灯 (红, 绿, 蓝)

状态指示灯说明

红灯: 充电指示灯, 长亮代表充电中;

绿灯: 充电指示灯, 长亮代表充电完成;

蓝灯: 状态指示灯, 5秒间隔闪烁

## 使用说明



iOS



Android

1. 下载APP并安装
2. 尿尿贴蓝色指示灯大约5秒间隔闪烁代表工作中, 否则请先充电再使用
3. 使用固定贴将尿尿贴固定到尿不湿外部, 信号采集口贴紧尿不湿
4. 按照APP交互指示连接尿尿贴
5. 开始监控
6. 系统进入自动监控状态, 当嘘嘘后系统会自动提示, 并音频报警
7. 尿尿贴无开关, 持续工作直至没电。如需停止监控, 可在APP中关闭报警。

## 产品规格



尺寸: 35 x 35 x 9 mm

湿度: 0 ~ 100 %RH

温度: 0 ~ 85 °C

蓝牙芯片: Dialog Semiconductor Da14580, BLE4.2

电池参数: 锂电池3.7V, 30mAh

支持机型: iPhone4S以后机型, Android绝大部分机型

支持系统: iOS8.0以上, Android4.3以上

## APP使用说明

第一步：绑定设备，按照提示打开设备开关和手机蓝牙，APP会自动扫描到设备，进行绑定。



第二步：监控设备，APP自动定时读取设备参数：湿度，温度，电池电量等。



第三步：事件报警，APP根据设备参数和内建算法，触发声音报警，通知用户。



第四步：家庭组报警，独创一对多连接技术，可以使得多个手机绑定一个设备，事件同时报警。

